

Starten Sie mit Q-interactive

Q-interactive Start-Up Guide




Hier finden Sie Anweisungen zum Installieren der Q-interactive Assess-App, zum Einrichten der richtigen Einstellungen auf beiden iPad-Geräten, zum Festlegen Ihrer Anmeldeinformationen und zum Erstellen einer Übungstestung. Wir empfehlen, die Tests einige Male zu üben, bevor Sie reale Patienten beurteilen. Bitte lesen Sie sich die Q-interactive-Schulungsmodule durch, da diese eine ausführliche Anleitung zur Einrichtung und Verwendung von Q-interactive bieten.

Abschnitt 1: Herunterladen der App Assess



Zur Nutzung des Systems muss die Q-interactive Assess App auf beide iPads heruntergeladen werden.

Schritt 1

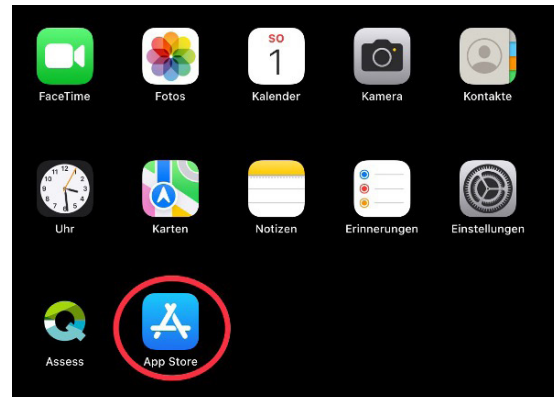

Öffnen Sie den App Store, den Sie auf dem Startbildschirm des iPads finden.

Schritt 2

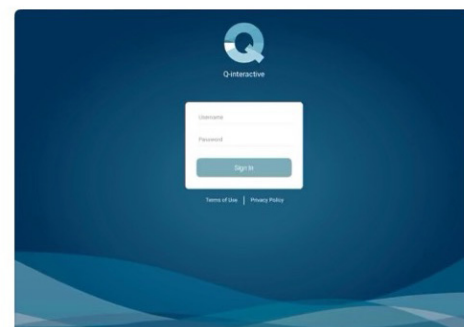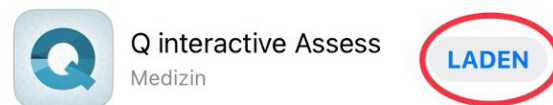


Suchen Sie nach "Q-Interactive" und tippen Sie auf „Laden“.

Abschnitt 2: Konfigurieren der iPads

Nachdem Assess heruntergeladen wurde, kann man die Einstellungen auf beiden Geräten konfigurieren. Dies ist aus mehreren Gründen ein wesentlicher Schritt:

- Die iPads müssen korrekt gekoppelt sein, um Daten voneinander zu erfassen.
- Stimuli werden standardmäßig angezeigt.
- Unterstützen des reibungslosen Betriebs von Q-interactive.
- Beseitigen von Ablenkungen, die während der Beurteilung auftreten können.

Schritt 1

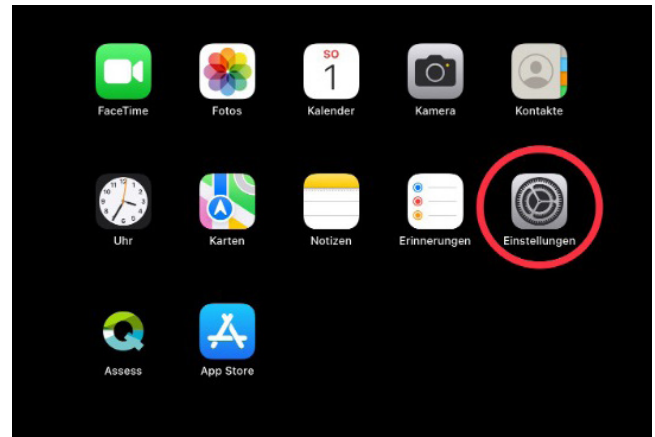

Öffnen Sie die App „Einstellungen“ auf dem Startbildschirm.

Schritt 2


Passen Sie Ihre iPads gemäß der folgenden Tabelle an. Q-interactive Assess nutzt WLAN, um die Geräte des Anwenders und des Patienten zu verbinden. Sie müssen mit einem aktiven WLAN-Netzwerk verbunden sein, um Bewertungen herunterzuladen und zu synchronisieren. Um Bewertungen zu verwalten, brauchen nicht mit einem aktiven Wi-Fi-Netzwerk verbunden sein, Sie müssen das WLAN jedoch auf beiden Geräten aktiviert haben.

Testleider iPad	Clüent iPad	Instelling	Menu	Optie
•	•	Wi-Fi	Wi-Fi aktivieren	Netzwerk auswählen
•	•	Allgemein	Tastatur	Auto. Großschreibung deaktivieren
•	•	Allgemein	Tastatur	Auto. Korrektur deaktivieren
	•	Bildschirm & Helligkeit	Helligkeit	Schieben Sie die Leiste ganz nach rechts
	•	Bildschirm & Helligkeit	Nachtmodus	Aus
	•	Bildschirm & Helligkeit	True Tone	True Tone deaktivieren
•	•	Bildschirm & Helligkeit	Auto-Sperre	15 Minuten
	•	Barrierefreiheit	Bildschirm & Textgröße	Auto-Helligkeit deaktivieren

Abschnitt 3: Erstellen einer Testsitzung

Mit Erhalt Ihrer Willkommens-E-Mail beginnen Sie damit, zunächst Ihre Anmeldedaten einzurichten.


Schritt 1

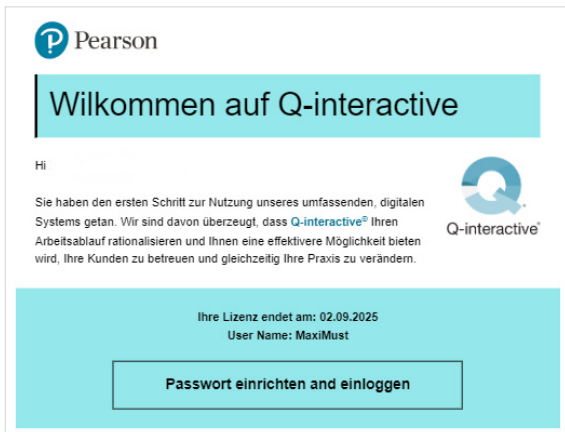

Der Link „Hier klicken“ öffnet die Seite zum Einrichten Ihres Q-interactive-Passworts.

Nachdem Sie das Passwort übermittelt und die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Q-interactive akzeptiert haben, können Sie nun eine Übungstestung erstellen.

Schritt 2

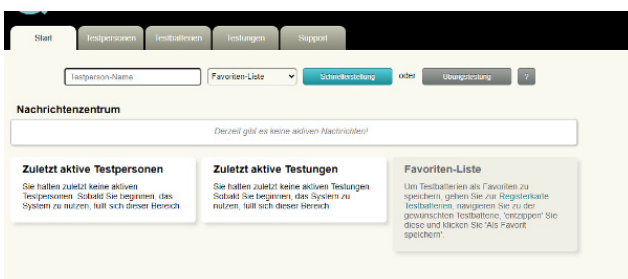

Klicken Sie auf der Registerkarte „Start“ auf die Schaltfläche „Testpersonen“, um das Patientenprofil zu erstellen und zu speichern.

Schritt 3



Wählen Sie eine Testbatterie aus, indem Sie auf die Schaltfläche „Testung erstellen“ klicken und dann auf die Schaltfläche „Weiter“ klicken.

Schritt 4



Legen Sie Datum und Uhrzeit für die Testung fest und klicken Sie auf die Schaltfläche „Fertig stellen“.


Schritt 5




Klicken Sie auf die Schaltfläche „An iPad senden“ und schon können Sie sich bei den iPads anmelden!

Schritt 6

Melden Sie sich bei beiden iPads mit denselben Anmeldeinformationen an, die Sie zuvor festgelegt haben, um mit dem Testen zu beginnen.

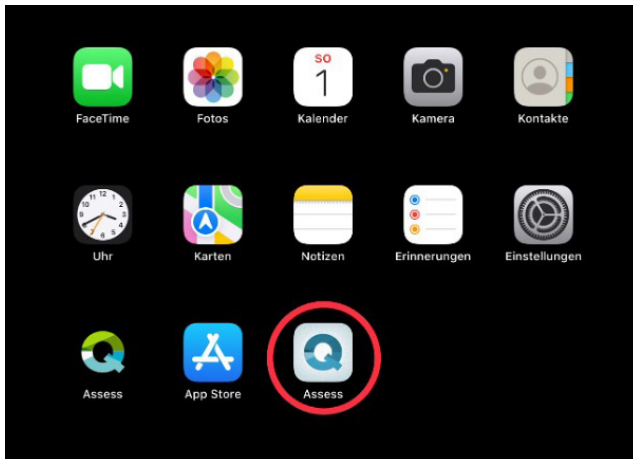


Schritt 7

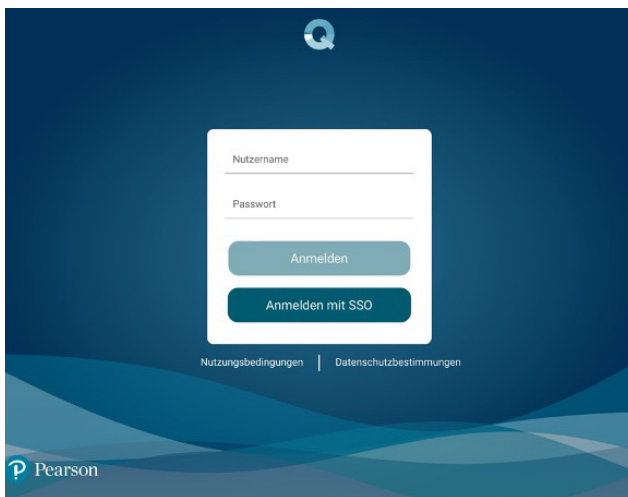

Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein. Der Download Ihrer vollständigen Testbibliothek dauert 10 bis 20 Minuten.

Ihre iPads werden verbunden, wenn Sie mit der Testung beginnen und beide Geräte korrekt konfiguriert wurden.

Schritt 8

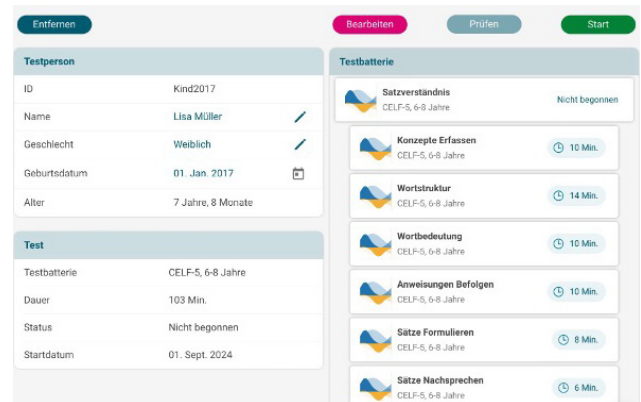

Tippen Sie auf die Schaltfläche „Start“, um mit der Testung zu beginnen. Übungstests verfügen über alle Funktionen echter Testungen, mit dem Unterschied, dass alle Ergebnisse standardmäßig auf Null gesetzt sind.

Glückwunsch! Sie sind jetzt bereit, Q-interactive zu verwenden!

Ausführliche Anweisungen finden Sie in den Q-interactive-Schulungsmodulen.

+49 (0)69-756146-0 | Pearsonclinical.de

Copyright © 2023 Pearson Education, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Pearson and Q-interactive are trademarks, in the US and/or other countries, of Pearson plc. iPad is a registered trademark of Apple Inc. C5429 SR 05/23